

## 实验说明-聚甲基丙烯酰亚胺

### 实验方案:

仪器设备: 通用型切割研磨机 Pulverisette 19

研磨设备: 不锈钢叠形刀 + 1mm 不锈钢筛网

进样量: ~70g


要求细度: 1-2mm

实验说明: 由于样品较脆且偏硬, 我们建议使用通用型切割研磨机 Pulverisette 19, 为满足细度需求, 可配 2mm 孔径的筛网。

⊙ 由于样品尺寸过大, 我们事先用手动切割机进行了处理:



切割后样品 ---- 收集盘中

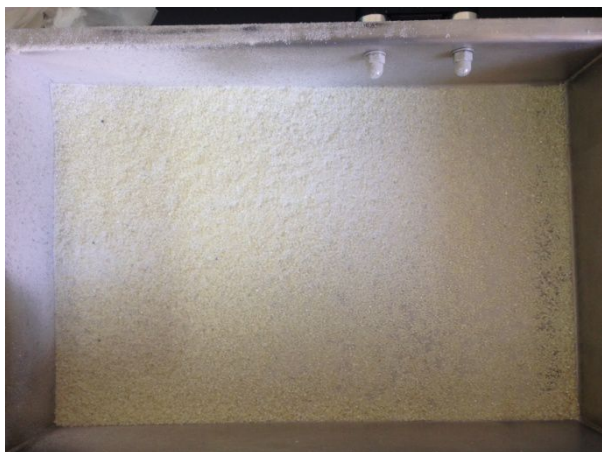

切割后样品

